



Manuale Asl WebCare Lazio

Studiofarma

26 Luglio 2012

Indice

1	Premessa	3
2	Impostazioni browser	4
3	Login	9
4	Cambio Password	11
5	Procedura di recupero password	13
5.1	Inserimento/Modifica e-mail per il recupero password	14
5.2	Recupero password	16
6	Elenco prodotti	18
7	Inserimento di un nuovo assistito	23
8	Ricerca di un assistito già presente nel sistema	25
9	Consultazione elenchi assistiti	27
10	Creazione del piano terapeutico	31
11	Funzioni per la gestione del piano terapeutico	38
12	Consultazioni piano terapeutico	49
13	Estrazione Movimenti	52
14	Cambio Distretto Asl	56


1 Premessa

Gli esempi riportati in questo documento potrebbero non corrispondere alla reale situazione della vostra ASL. Lo scopo di quanto viene descritto è quello di fornire una spiegazione sulle modalità operative messe a disposizione dall'applicazione. Si ponga quindi attenzione all'aspetto funzionale delle varie operazioni trattate e non alla rappresentazione dei dati che costituiscono solo degli esempi. Inoltre è possibile che non tutte le funzionalità qui illustrate siano effettivamente disponibili nella vostra realtà.

2 Impostazioni browser

Per evitare problemi nel download dei documenti PDF, è necessario verificare alcune impostazioni al proprio browser. Per gli utenti di Internet Explorer è necessario:

- aprire il browser
- andare sul menù "Strumenti" e premere "Opzioni internet"
- selezionare "Protezione", evidenziare l'area "Siti attendibili", e premere il pulsante "Siti":

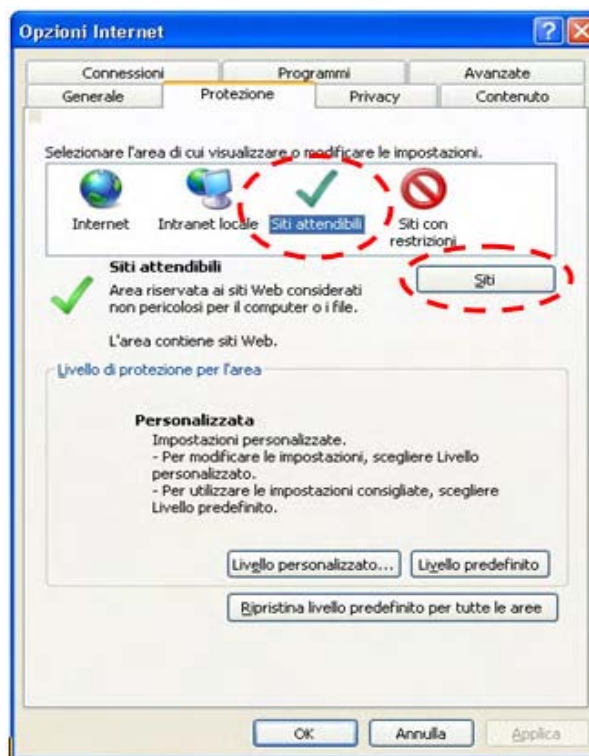


- inserire l'indirizzo web di WebCare nella casella "Aggiungi il sito Web all'area", preceduto dal prefisso "https://", ad esempio:




Quindi premere il pulsante "Aggiungi" e, se mancante, apporre il segno di spunta sulla casella "Richiedi verifica server". Al termine conformare premendo il pulsante "Chiudi":



- quindi premere il pulsante “Livello personalizzato . . .”:

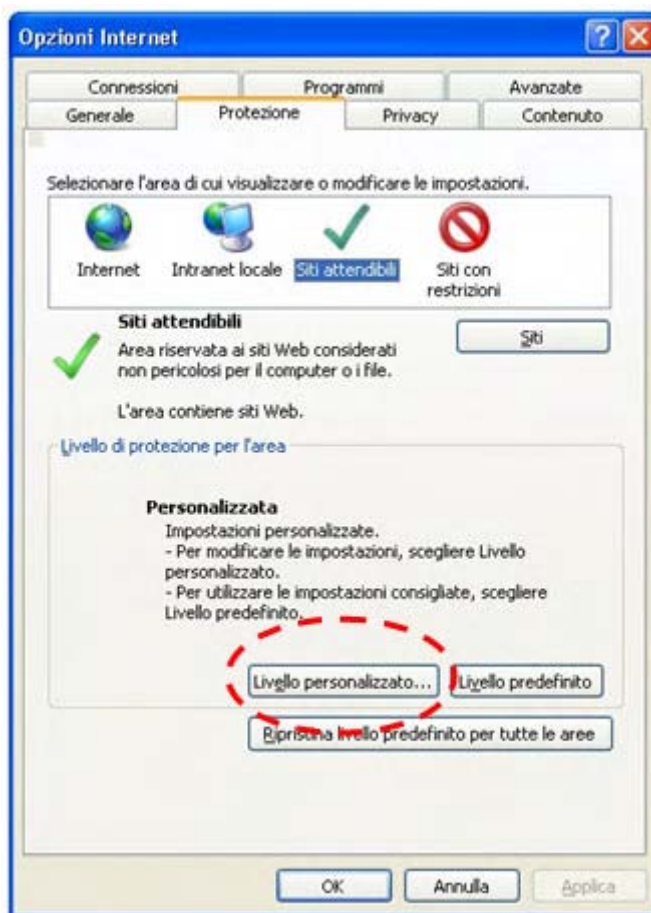

- impostare come "attive" le voci "Download dei file" e "Richiesta di conferma automatica per download di file":

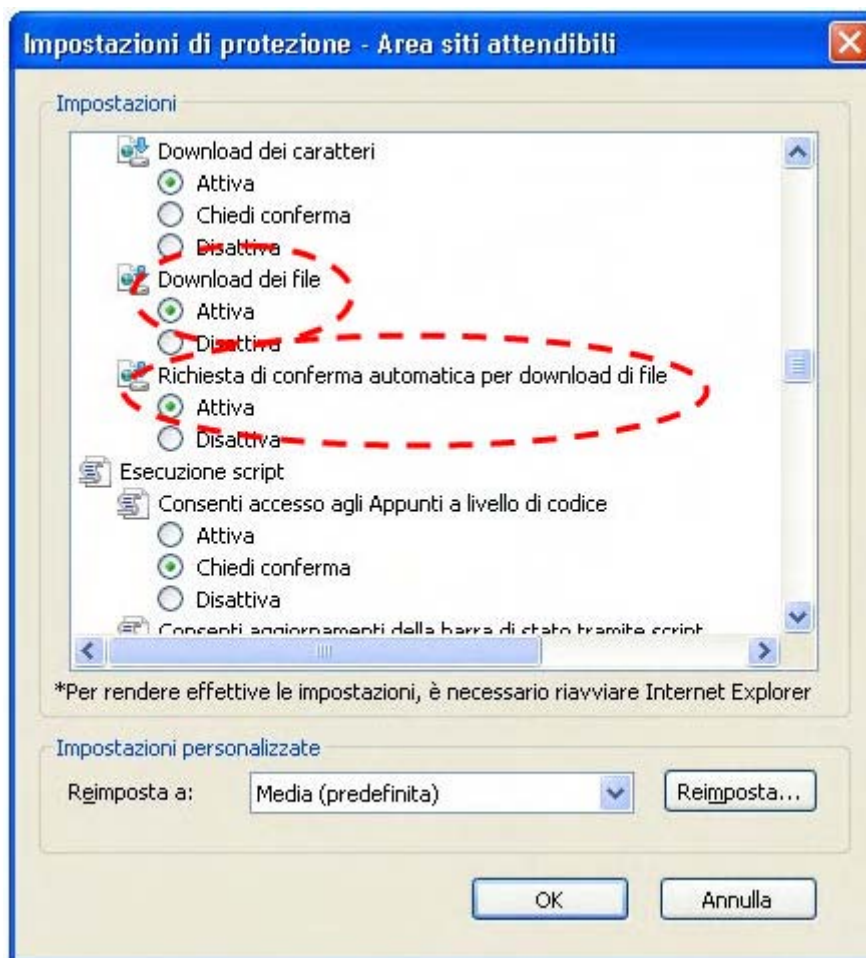

Per gli utenti di altri browser, la procedura è analoga, ma l'aspetto delle schermate di configurazione potrebbe variare.


3 Login

L'accesso al sistema avviene tramite collegamento ad un indirizzo Web e l'introduzione di una coppia di credenziali Login e Password:



Fare riferimento al proprio servizio di assistenza per farsi comunicare login e password, oppure per farseli ripristinare in caso di smarrimento.

Apponendo il segno di spunta sulla casella "Login automatico per le prossime 24 ore":

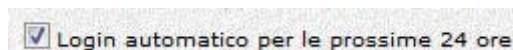

il sistema bypasserà la schermata di autenticazione per le successive 24 ore dopo la login. Ciò vuol dire che, anche scollegandosi e ricollegandosi in un secondo tempo, il sistema visualizzerà automaticamente il menù principale del programma. Consigliamo di usare questa funzionalità soltanto in caso il terminale utilizzato non sia accessibile a persone estranee.

4 Cambio Password

Per motivi di sicurezza il sistema prevede che, al primo accesso, e almeno una volta ogni 3 mesi, la farmacia cambi la propria password. A tale scopo viene presentata la seguente schermata:

WebCare

Cambio Password

Il sistema, secondo quanto indicato nel **Documento Programmatico sulla Sicurezza**, obbliga un cambio password nei seguenti casi:

- 1) al primo accesso al sistema
- 2) nel caso in cui l'amministratore del sistema l'abbia dovuta modificare
- 3) ogni tre mesi

Inserire la vecchia password ed una nuova di propria scelta.

Attenzione: la nuova password DEVE essere lunga almeno 8 caratteri e non superiore a 15 caratteri.

La nuova password DEVE essere DIVERSA dal nome utente.

Ultimo accesso al sistema:

17/09/2010 11:40:38

Ultimo cambio password:

01/03/2010 15:56:38

Vecchia password o password provvisoria

[Hai dimenticato la Password?](#)

Nuova password

Conferma nuova password


Aggiorna

Per cambiare la password basta inserire i dati nelle tre caselle:

- “vecchia password” - la password utilizzata per l’accesso
- “nuova password” - una nuova password di almeno 8 caratteri e non superiore a 15, alfanumerica
- “conferma nuova password” - va ripetuta la nuova password inserita nella casella precedente

Concludere l’operazione premendo il pulsante “Aggiorna”.

E’ sempre possibile modificare la Password accedendo alla pagina “Modifica Password”

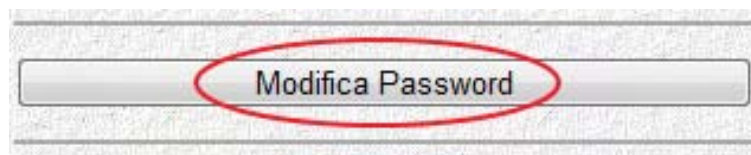


5 Procedura di recupero password


Nel caso in cui un utente dimentichi la password di accesso al sistema WebCare, è disponibile una funzionalità di recupero password. Va sottolineato che, per motivi di sicurezza, il sistema non comunica la password che l'utente ha dimenticato, ma effettua un reset e genera una nuova password valida solo al primo accesso successivo. La nuova password viene inviata da WebCare all'utente via e-mail, quindi la presenza dell'indirizzo e-mail dell'utente negli archivi del sistema WebCare è un requisito indispensabile per concludere con successo la procedura.

5.1 Inserimento/Modifica e-mail per il recupero password

E' possibile inserire/modificare autonomamente in WebCare l'indirizzo e-mail per la spedizione della password. Dal menu principale, premere il pulsante "Modifica E-mail":

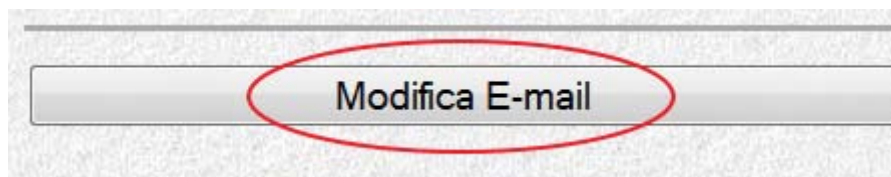

All'interno della maschera "Modifica E-mail" inserire o modificare l'indirizzo e-mail nel campo di testo "Nuova E-Mail".

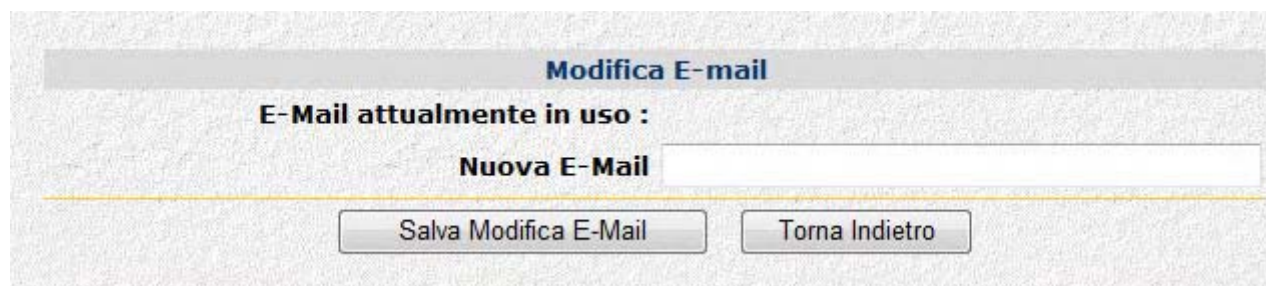A screenshot of the "Modifica E-mail" form. At the top, there is a header bar with the text "Modifica E-mail" in blue. Below this, the text "E-Mail attualmente in uso :" is displayed. Underneath, the text "Nuova E-Mail" is followed by a white text input field. At the bottom of the form, there are two buttons: "Salva Modifica E-Mail" on the left and "Torna Indietro" on the right. A horizontal yellow line is positioned above the buttons.

Inserito l'indirizzo e-mail premere il pulsante "Salva Modifica E-Mail". Premendo il pulsante si attiva un controllo di sicurezza che richiede l'inserimento della password di accesso a WebCare:



Modifica E-mail

E-Mail attualmente in uso :

Nuova E-Mail

Per completare la modifica inserire Password WebCare

Password WebCare

Premere il pulsante "Ok" per passare il controllo di sicurezza.



WebCare Lecco

Modifica E-mail

E-Mail attualmente in uso :

Nuova E-Mail

E-Mail modificata correttamente

5.2 Recupero password

Nella maschera di Login è presente il collegamento "[Hai dimenticato la password ?](#)":




The image shows a login form with two input fields labeled 'Login' and 'Password'. Below the 'Password' field, the text 'Hai dimenticato la Password?' is highlighted with a red oval. Underneath, there is a checkbox labeled 'Login automatico per le prossime 24 ore'. At the bottom of the form is a button labeled 'Entra'.

Con un click del mouse sul collegamento, compare l'apposita maschera di recupero password. Per recuperare la password è necessario inserire la login dell'utente e l'indirizzo e-mail fornito in precedenza e presente in WebCare. E' attivo un meccanismo di controllo che verifica che l'indirizzo e-mail inserito coincida con quello effettivamente presente negli archivi WebCare:



The image shows a form titled 'Recupera Password'. It has two input fields: 'Login' and 'Indirizzo E-Mail'. Below the fields are two buttons: 'Recupera Password' and 'Torna Indietro'. Red arrows point to the 'Login' field, the 'Indirizzo E-Mail' field, and the 'Recupera Password' button.

Premendo il pulsante "Recupera Password" il sistema invia una e-mail contenente un messaggio simile a quello dell'immagine che segue :

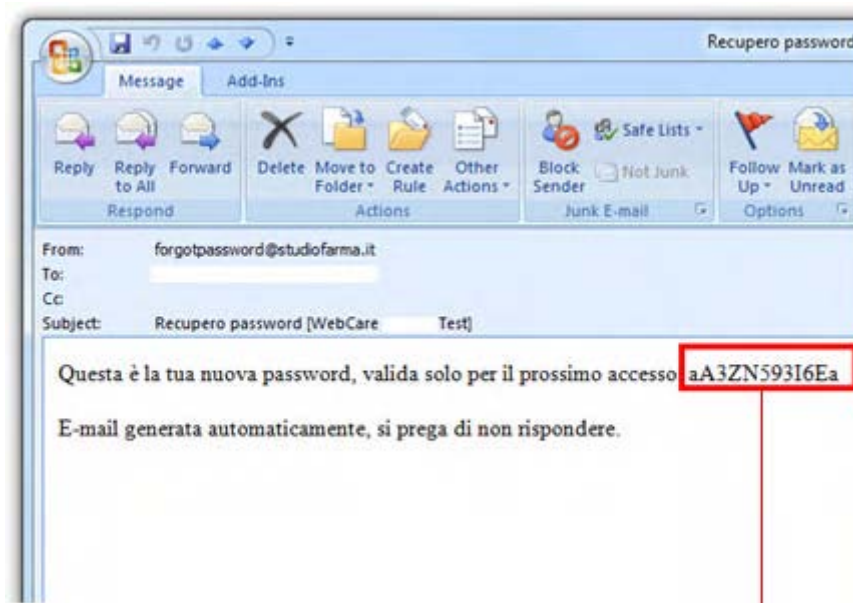

A questo punto è possibile ripetere la procedura di log-in inserendo nel campo "password" la password inviata tramite e-mail.



La nuova password è valida solo al primo accesso, quindi il sistema indirizza l'utente alla pagina di "Cambio Password".

6 Elenco prodotti



Nel menù principale è presente il pulsante “Elenco Prodotti” che consente l’accesso alla consultazione dell’anagrafica dei macrocodici Autorizzativi (Codici ISO, Nomenclatori o Macrocodici Fittizi) e dei prodotti commerciali erogabili tramite WebCare:

Elenco Prodotti

Filtra per:

Categoria: Codice ISO:

Codice Paraf/Minsan: Descrizione Paraf/Minsan:

Codice EAN: GMP:

Codice Interno Ditta: Ditta produttrice:


Ordina per:

Visualizza:


<input checked="" type="checkbox"/> Categoria	<input checked="" type="checkbox"/> Codice Paraf/Minsan	<input type="checkbox"/> Prezzo Paraf/Minsan	<input type="checkbox"/> Tipo prezzo applicato
<input checked="" type="checkbox"/> Codice ISO	<input checked="" type="checkbox"/> Descrizione Paraf/Minsan	<input type="checkbox"/> Aliquota IVA Paraf/Minsan	<input checked="" type="checkbox"/> Prezzo applicato
<input checked="" type="checkbox"/> Descrizione ISO	<input type="checkbox"/> Codice EAN	<input type="checkbox"/> Tipo sconto	<input type="checkbox"/> Codice prodotto ASL
<input type="checkbox"/> Confezione ISO	<input type="checkbox"/> GMP	<input type="checkbox"/> Sconto %	<input type="checkbox"/> Codice produttore
<input type="checkbox"/> Prezzo ISO	<input checked="" type="checkbox"/> Ditta produttrice	<input type="checkbox"/> Provvigione %	<input type="checkbox"/> Prezzo al Kg
<input type="checkbox"/> Aliquota IVA ISO	<input type="checkbox"/> Confezione Paraf/Minsan	<input type="checkbox"/> Unità di misura	<input type="checkbox"/> Tipo aliquota IVA

Da questa schermata è possibile effettuare l'estrazione dei prodotti distribuibili nella vostra Asl, vediamo come fare :

- Premere il pulsante "Ricerca Avanzata" per abilitare la selezione dei filtri

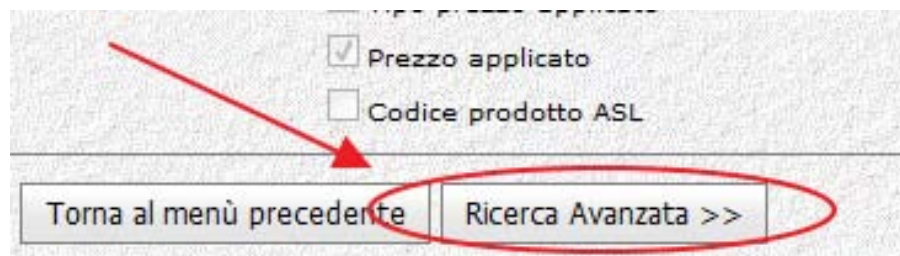

- Ordinamenti (sezione "Ordina per"): valorizzando questi campi è possibile dire al sistema di ordinare i dati estratti secondo uno o più criteri. È possibile definire fino a 4 ordinamenti, che vengono applicati nell'ordine con cui vengono selezionati. È possibile selezionare un campo per l'ordinamento soltanto se lo stesso campo è stato selezionato anche nella sezione "Visualizza":

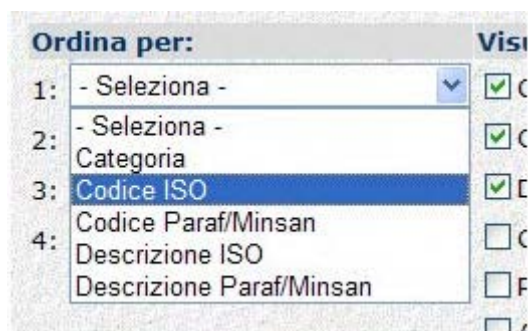

Premendo il pulsante "Ricerca Avanzata" si abilita una terza sezione:

- Visualizzazioni (sezione "Visualizza"): mettendo il segno di spunta accanto ai campi si indica al sistema quali informazioni si desidera che vengano visualizzate:

Elenco Prodotti

Filtra per:

Categoria: Codice ISO:

Codice Paraf/Minsan: Descrizione Paraf/Minsan:

Codice EAN: GMP:

Codice Interno Ditta: Ditta produttrice:

Ordina per:

Visualizza:

Categoria Codice Paraf/Minsan Prezzo Paraf/Minsan Tipo prezzo applicato

Codice ISO Descrizione Paraf/Minsan Aliquota IVA Paraf/Minsan Prezzo applicato

Descrizione ISO Codice EAN Tipo sconto Codice prodotto ASL

Confezione ISO GMP Sconto % Codice produttore

Prezzo ISO Ditta produttrice Provvigione % Prezzo al Kg

Aliquota IVA ISO Confezione Paraf/Minsan Unità di misura Tipo aliquota IVA


Il risultato della ricerca viene presentato mostrando i dati principali dei prodotti che soddisfano i criteri impostati:

Filtro applicato: nessuno

Numero record trovati: 12435

Codice ISO	Descrizione ISO	Codice Paraf/Minsan	Descrizione Paraf/Minsan	Codice EAN	GMP	Ditta produttrice	Confezione Paraf/Minsan	Prezzo applicato
01a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 36 CPR REATTIVE	908234457	CLINITEST 36CPR REATTIVE	5016003210709	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	36	3,96003
01a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 36 CPR REATTIVE GEST	908234457	CLINITEST 36CPR REATTIVE	5016003210709	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	36	4,60734
02a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE	908234305	CLINISTIX 50 STRICE REATTIVE	5016003284403	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	50	4,40024
02a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE	908333483	DIABURTEST 5000 50STR	4015630000197	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	50	4,40024
02a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE	908336151	DIASTIX 50 STRISCE REATTIVE	5016003280405	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	50	4,40024
02a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE GEST	908234305	CLINISTIX 50 STRICE REATTIVE	5016003284403	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	50	5,11951
02a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE GEST	908333483	DIABURTEST 5000 50STR	4015630000197	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	50	5,11951
02a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE GEST	908336151	DIASTIX 50 STRISCE REATTIVE	5016003280405	7AB1B07 - TEST GLICOSURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	50	5,11951
04a	REATTIVI PER CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE	908575855	KETOSTIX 50 STRISCE REATTIVE	5016003288005	7AB1B05 - TEST CHETONURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	50	3,99984
04a_GEST	REATTIVI PER CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE GEST	908575855	KETOSTIX 50 STRISCE REATTIVE	5016003288005	7AB1B05 - TEST CHETONURIA	BAYER SpA (DIV.DIABETE)	50	4,65366

Oltre ad essere visualizzati, i dati relativi ai prodotti possono essere stampati in formato PDF, scaricati in formato CSV (file di testo) o Excel:

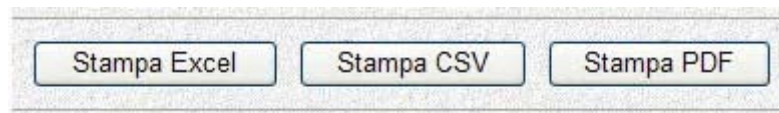

Premendo uno di questi 3 pulsanti il sistema propone l'apertura oppure il download di un file:



In caso non compaia la finestra di apertura / download del file, sarà necessario modificare la configurazione del proprio browser per abilitare il download (cfr. paragrafo "Impostazioni Browser"). Il file scaricato è visibile nella seguente immagine:

ElencoProdotti.csv - Microsoft Excel

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza

Calibri 11 A A

Incolla Appunti

Carattere Allineamento Numeri Stili

Formattazione condizionale Formatta come tabella Stili cella

Inserisci Elimina Formato

Ordina e filtra Trova e seleziona Modifica

A40 07a

	A	B	C	D
1	codicelso	descrizioneIso	codiceMinsan	descrizioneMinsan
2	01a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 36 CPR REATTIVE	908234457	CLINITEST 36CPR REATTIVE
3	01a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 36 CPR REATTIVE GEST	908234457	CLINITEST 36CPR REATTIVE
4	02a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE	908234305	CLINISTIX 50 STRICE REATTIVE
5	02a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE	908333483	DIABURTEST 5000 50STR
6	02a	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE	908336151	DIASTIX 50 STRISCE REATTIVE
7	02a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE GEST	908234305	CLINISTIX 50 STRICE REATTIVE
8	02a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE GEST	908333483	DIABURTEST 5000 50STR
9	02a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA - 50 STRISCE GEST	908336151	DIASTIX 50 STRISCE REATTIVE
10	04a	REATTIVI PER CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE	908575855	KETOSTIX 50 STRISCE REATTIVE
11	04a_GEST	REATTIVI PER CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE GEST	908575855	KETOSTIX 50 STRISCE REATTIVE
12	05a	REATTIVI PER CORPI CHETONICI - 25 STRISCE REATTIVE	908576150	KETURTEST 25STR
13	05a_GEST	REATTIVI PER CORPI CHETONICI - 25 STRISCE REATTIVE GEST	908576150	KETURTEST 25STR
14	06a	REATTIVI PER GLICOSURIA + CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE	908575309	KETODIABURTEST 5000 50STR
15	06a	REATTIVI PER GLICOSURIA + CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE	908575451	KETODIASTIX 50 STRISCE REATT
16	06a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA + CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE GEST	908575309	KETODIABURTEST 5000 50STR
17	06a_GEST	REATTIVI PER GLICOSURIA + CORPI CHETONICI - 50 STRISCE REATTIVE GEST	908575451	KETODIASTIX 50 STRISCE REATT
18	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	900131499	ACCU-CHEK SENSOR COMFORT 50STR
19	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	900145487	GLUCODISC 50 STRISCE
20	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	900145552	ELITE 25 STRISCE
21	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	900261544	OPTIUM PLUS BLOOD GLUC 50STR
22	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	901407926	EUROFLASH STRIPS 25STR
23	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	901424275	PRECISION PLUS ELECTRO 25STR+1
24	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	901424287	PRECISION PLUS ELECTRO 50STR+1
25	07a	REATTIVI PER GLUCOSEMIA - 25 STRISCE REATTIVE	901591622	GLUCOCARD G SENSOR 50STR

ElencoProdotti

Pronto

100%

7 Inserimento di un nuovo assistito

Dal menù principale premere su "Area Assistiti". Premere quindi "Inserimento Nuovo Assistito". I dati relativi al nuovo assistito da aggiungere nel sistema possono essere recuperati utilizzando i seguenti criteri di ricerca:

Inserimento nuovo assistito

Ricerca assistito da inserire per:



Codice Sanitario

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Per ottenere un risultato è necessario inserire uno o più valori, che possono anche essere combinati tra loro: l'esatto codice sanitario, l'esatto codice fiscale, il cognome o la sua parte iniziale, il nome o una parte di esso. Tutti gli assistiti che soddisferanno i criteri di ricerca impostati verranno elencati nel modo seguente:

Distretto	Cognome	Nome	Sesso	Codice Sanitario	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita	Domicilio	Residenza	Stato Assistito	Aggiungi	Scheda Assistito
01 Pisa	ROSSI	MARIO	M	0A012345678	RSSMRA32T31F671H	01/01/1940	PISA	via garibaldi, 1 56100 PISA (PI)	via garibaldi, 1 56100 PISA (PI)	Attivo	Già inserito	
02 Val d'Era	ROSSI	MARIO	M	06035181681	RSSMRA44C08I232M	08/03/1944	SANTA MARIA A MONTE	VIA Y. GAGARIN,110 56025 PONTEDERA (PI)	VIA Y. GAGARIN,110 56025 PONTEDERA (PI)	Attivo		Non inserito

Ogni riga rappresenta un assistito, ciascuno con i propri dati anagrafici.

Se un assistito è già presente nel sistema perché inserito precedentemente, questo verrà contrassegnato in questo modo:

Distretto	Cognome	Nome	Sesso	Codice Sanitario	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita	Domicilio	Residenza	Stato Assistito	Aggiungi	Scheda Assistito
01 Pisa	ROSSI	MARIO	M	0A012345678	RSSMRA32T31F671H	01/01/1940	PISA	via garibaldi, 1 56100 PISA (PI)	via garibaldi, 1 56100 PISA (PI)	Attivo	Già inserito	

Per accedere alla sua scheda basta cliccare sull'icona in corrispondenza della colonna "Scheda Assistito".
Se un assistito non è mai stato inserito nel sistema, allora si troverà nella seguente situazione:

Distretto	Cognome	Nome	Sesso	Codice Sanitario	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita	Domicilio	Residenza	Stato Assistito	Aggiungi	Scheda Assistito
02 Val d'Era	ROSSI	MARIO	M	06035181681	RSSMRA44C08I232M	08/03/1944	SANTA MARIA A MONTE	VIA Y. GAGARIN,110 56025 PONTEDERA (PI)	VIA Y. GAGARIN,110 56025 PONTEDERA (PI)	Attivo		Non inserito

Per inserirlo nel sistema e creare quindi una nuova scheda assistito, è sufficiente cliccare sull'icona in corrispondenza della colonna "Aggiungi".

Se da un inserimento per cognome o nome il risultato della ricerca non dà esito, provare per codice fiscale. Infatti nei casi in cui è abilitato l'inserimento di assistiti non presenti in anagrafica, l'unico modo per creare una nuova scheda assistito vuota è quello di ricerca per codice sanitario o fiscale. Vi verrà chiesto di selezionare il distretto asl d'appartenenza dell'assistito prima di procedere con la compilazione della scheda



Nessun assistito trovato.

Il Codice Fiscale o il Codice Sanitario potrebbero essere errati, verificare l'esistenza dell'assistibile utilizzando un altro criterio di ricerca.
Se si desidera effettuare comunque l'inserimento con . selezionare il distretto ASL di competenza:

Premere "Conferma" dopo aver selezionato il distretto asl per proseguire o "Torna indietro" per annullare l'inserimento

8 Ricerca di un assistito già presente nel sistema

Se si ha la certezza che un assistito sia già presente in WebCare, non è necessario utilizzare la funzione di "Inserimento Nuovo Assistito" ma basta cercarlo con la funzione "Ricerca Assistiti", raggiungibile dal pannello principale premendo sul pulsante "Area Assistiti". Sono disponibili una serie di filtri che permettono di individuare l'assistito desiderato. Il risultato della ricerca potrà essere rappresentato da uno o più assistiti che soddisfano i criteri impostati:

Scheda	Cognome Nome	Data Nascita	Codice Sanitario	Codice Fiscale	Distretto	Domicilio	Residenza	Anno/Nr.Pratica	Stato Assistito
	ROSSI ANNA	18/08/1931	06016873496	RSSNNA31M58A562P	01 Pisa	VIA DE NITTIS,18, 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)	VIA DE NITTIS,18, 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)	2007/2	Attivo
	ROSSI MARIO	01/01/1940	0A012345678	RSSMRA32T31F671H	01 Pisa	via garibaldi, 1, 56100 PISA (PI)	via garibaldi, 1, 56100 PISA (PI)	2007/1	Attivo

Per accedere alla scheda assistito, cliccare sull'icona in corrispondenza della colonna "Scheda".

La scheda assistito è composta da una parte dedicata ai dati anagrafici:

Scheda Assistito									
Codice Sanitario: 06016873496 <input type="button" value="Modifica"/>									
Cognome		Nome		Sesso		Codice Fiscale			
ROSSI		ANNA		Femmina		RSSNNA31M58A562P <input type="checkbox"/> automatico			
Data Nascita		Luogo Nascita			Stato Civile		Nr. Telefono		
18/08/1931		SAN GIULIANO TERME <input type="button" value="Comuni"/>			Non noto				
Residenza: Indirizzo		CAP	Luogo e Provincia			Regione	ASL	Copia	
<input type="button" value="Storico"/> via de nitis,18		56017	SAN GIULIANO TERME PI <input type="button" value="Comuni"/>			TOSCANA	pisa	da domicilio	
Domicilio: Indirizzo		CAP	Luogo e Provincia			Regione	ASL	Copia	
<input type="button" value="Storico"/> via de nitis,18		56017	SAN GIULIANO TERME PI <input type="button" value="Comuni"/>			TOSCANA	pisa	da residenza	
Distretto		Anno / Nr. Pratica			Medico Curante		Stato	Data Decorrenza	
01 Pisa		2007 / 2 <input type="button" value="Modifica"/>					Attivo	14/08/2007 <input type="button" value="Storico"/>	

9 Consultazione elenchi assistiti

La funzionalità di consultazione degli Elenchi Assistiti è accessibile dal menù principale, tramite il pulsante “Area Assistiti” e quindi “Elenchi Assistiti”. Alla pressione del pulsante viene presentata la seguente schermata:

Anagrafica assistiti - Filtra per:

Dati anagrafici:

Assistiti del distretto di...

Assistiti in stato... ...nel periodo dal: al:

Assistiti residenti... ...in ASL, fuori ASL o sconosciuto (indifferente)
 ...in ASL
 ...fuori ASL
 ...(sconosciuto)

Assistiti domiciliati... ...in ASL, fuori ASL o sconosciuto (indifferente)
 ...in ASL
 ...fuori ASL
 ...(sconosciuto)

Assistiti che hanno cambiato residenza... ...nel periodo dal: al:

Assistiti che hanno cambiato domicilio... ...nel periodo dal: al:

Assistiti con diagnosi di...

Autorizzato:

Categoria prescritta:

Categoria attualmente in stato... Prodotto ISO prescritto:

Prodotto commerciale prescritto(minsan/paraf):

Piani terapeutici da considerare: piani attualmente in vigore + storico
 solo piani attualmente in vigore

Inizio piano terapeutico: per la prima volta dal: al:

Piano terapeutico in corso: dal: al:

Erogato:

Categoria erogata: Prodotto ISO erogato:

Prodotto commerciale erogato (minsan/paraf):

Assistiti... ...con movimenti o senza movimenti (indifferente)
 ...con almeno un movimento...
 ...senza alcun movimento... ...dal: al:

Ordina per:

Visualizza:

Categoria Codice prodotto (ISO/minsan) Stato categoria Data di nascita Assistito

Distretto Stati assistito Diagnosi Medico curante

Codice Sanitario Assistito Conteggio assistiti Codice Fiscale Assistito

Inirizzo assistiti: residenza domicilio Sesso Assistito

Da questa schermata è possibile generare numerose diverse estrazioni combinando tra di loro 3 tipi di parametri e premendo il pulsante "Cerca":

1. Filtri (sezione "Filtra per"): valorizzando questi campi è possibile far estrarre al sistema solamente assistiti relativi ad un determinato distretto, ad una determinata autorizzazione o ad una determinata erogazione di prodotti. L'ultimo filtro permette di impostare un intervallo temporale di ricerca. I filtri sono suddivisi in 3 sezioni "Dati Anagrafici", "Autorizzato", "Erogato".
2. Visualizzazioni (sezione "Visualizza"): mettendo il segno di spunta accanto ai campi si indica al sistema quali informazioni si desidera che vengano visualizzate.
3. Ordinamenti (sezione "Ordina per"): valorizzando questi campi è possibile dire al sistema di ordinare i dati estratti secondo uno o più criteri. È possibile definire fino a 4 ordinamenti, che vengono applicati nell'ordine con cui vengono selezionati. È possibile selezionare un campo per l'ordinamento soltanto se lo stesso campo è stato selezionato anche nella sezione "Visualizza".

Il tempo necessario all'elaborazione (tra quando viene premuto il pulsante "Cerca" a quando vengono mostrati i risultati), può variare da pochi secondi ad alcuni minuti, a seconda del numero di filtri impostati, del numero di campi di cui si richiede la visualizzazione, del numero di record restituiti, ed infine dalla velocità della connessione Internet che si sta utilizzando.

Nel seguente esempio vengono estratti gli assistiti che possiedono o hanno posseduto un Piano Terapeutico di "DIETETICI APROTEICI", e che hanno effettuato almeno un movimento (prelievo di prodotti) tra il 01/01/2010 ed il 31/03/2010. Di questi assistiti si vuole averne il conteggio suddiviso e ordinato per distretto di appartenenza:

Anagrafica assistiti - Filtra per:

Dati anagrafici:

Assistiti del distretto di...

Assistiti in stato... ...nel periodo dal: al:

Assistiti residenti... ...in ASL, fuori ASL o sconosciuto (indifferente)
 ...in ASL
 ...fuori ASL
 ...(sconosciuto)

Assistiti domiciliati... ...in ASL, fuori ASL o sconosciuto (indifferente)
 ...in ASL
 ...fuori ASL
 ...(sconosciuto)

Assistiti che hanno cambiato residenza... al:

Assistiti che hanno cambiato domicilio... al:

Assistiti con diagnosi di...

Autorizzato:

Categoria prescritta:

Categoria attualmente in stato...

Prodotto commerciale prescritto(minsan/paraf):

Inizio piano terapeutico: per la prima volta dal: al:

Prodotto ISO prescritto:

Piani terapeutici da considerare: piani attualmente in vigore + storico
 solo piani attualmente in vigore

Piano terapeutico in corso: dal: al:

Erogato:

Categoria erogata:

Prodotto commerciale erogato (minsan/paraf):

Assistiti... ...con almeno un movimento... al:
 ...con movimenti o senza movimenti (indifferente)
 ...senza alcun movimento...

Ordina per:

1: <input type="text" value="Distretto"/>	<input type="checkbox"/> Categoria	<input type="checkbox"/> Codice prodotto (ISO/minsan)	<input type="checkbox"/> Stato categoria	<input type="checkbox"/> Data di nascita Assistito
2: <input type="text" value="- Seleziona -"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Distretto	<input type="checkbox"/> Stati assistito	<input type="checkbox"/> Diagnosi	<input type="checkbox"/> Medico curante
3: <input type="text" value="- Seleziona -"/>	<input type="checkbox"/> Codice Sanitario Assistito	<input checked="" type="checkbox"/> Conteggio assistiti	<input type="checkbox"/> Codice Fiscale Assistito	
4: <input type="text" value="- Seleziona -"/>	<input type="checkbox"/> Cognome e nome	Indirizzo assistiti: <input type="checkbox"/> residenza <input type="checkbox"/> domicilio	<input type="checkbox"/> Sesso Assistito	

Il risultato è il seguente:


Filtro applicato: assistiti che soddisfano TUTTI i seguenti criteri:
 - sono autorizzati al ritiro di prodotti per la Categoria DIETETICI APROTEICI
 - hanno effettuato almeno un ritiro tra il 01/01/2010 e il 31/03/2010

Distretto	Conteggio
00 - ** Distretto non conosciuto **	1
01 - CHIERI	76
02 - CARMAGNOLA	53
03 - MONCALIERI	62
04 - NICHELINO	49

Pagine: 1

Record totali: 5

Il risultato può essere stampato, esportato su file Excel o su file CSV tramite gli appositi pulsanti:

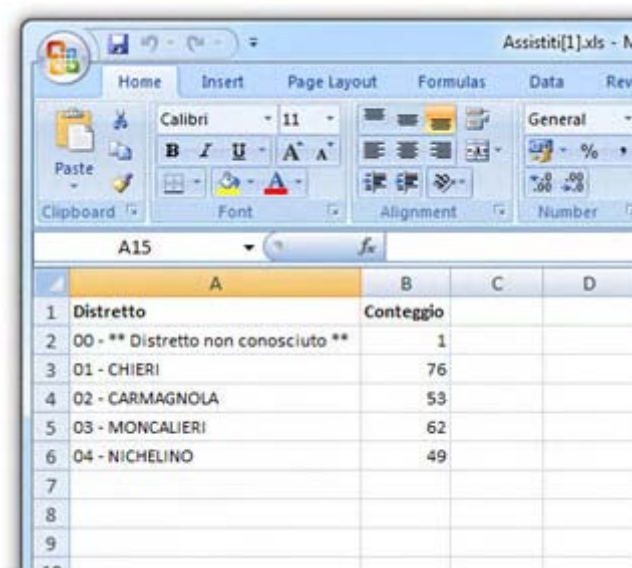

10 Creazione del piano terapeutico

L'inserimento di un prodotto nel piano terapeutico parte dalla selezione della diagnosi:



Premendo il pulsante "Salva modifiche" la diagnosi viene aggiunta nella scheda:

Diagnosi	Data Diagnosi	Ente Diagnosi	Note Diagnosi
003 - Diabete tipo 1 o 2 >18 anni in tratt. insulinico	25/07/2012		E

Eventualmente è possibile inserirne altre procedendo nella stessa maniera. Le diagnosi inserite per errore possono essere eliminate con il pulsante "E" (elimina) situato accanto alle "Note Diagnosi". Con l'inserimento della diagnosi, la lista dei prodotti autorizzabili risulterà disponibile:

Piano Terapeutico							
Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
- Selezione -			25 Luglio 2012		3	4	<input type="checkbox"/>
- Selezione -			25 Luglio 2012		3	4	<input type="checkbox"/>
- Selezione -			25 Luglio 2012		3	4	<input type="checkbox"/>

Non c'è un limite ai prodotti che possono essere autorizzati, l'inserimento va però eseguito salvando al massimo tre prodotti per volta. Dalla lista dei prodotti va selezionata una delle voci presenti:

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
	(dia.) 7AC2A01 - aghi per penna da insulina (unità)		25 Luglio 2012		3	4	<input type="checkbox"/>

Poi va indicata la data di decorrenza dalla quale l'assistito ha diritto a ritirare la sua fornitura in farmacia:

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
	(dia.) 7AC2A01 - aghi per penna da insulina (unità)		25 Luglio 2012		3	4	<input type="checkbox"/>

Vanno indicate le quantità autorizzate per periodo, facendo riferimento all'unità di misura prevista per il prodotto ("unità" in questo esempio) e alla durata del periodo (tre mesi in questo esempio)

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
	(dia.) 7AC2A01 - aghi per penna da insulina (unità)		25 Luglio 2012	90	3	4	<input type="checkbox"/>

La periodicità del piano NON E' MODIFICABILE dall'operatore. WebCare Lazio prevede:

- Diabetica : Periodicità trimestrale
- IRC : Periodicità mensile

I periodi sono l'insieme dei mesi a cui fanno riferimento le quantità autorizzate. Le ripetizioni, MODIFICABILI, definiscono il numero di periodi che compongono il piano

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
	(dia.) 7AC2A01 - aghi per penna da insulina (unità)		25 Luglio 2012	90	3	4	<input type="checkbox"/>

Esempio: un piano trimestrale con durata annuale sarà composto da periodo=3 (NON MODIFICABILE) e ripetizioni= 4.

La quantità autorizzata va inserita facendo riferimento alla durata del periodo (la quantità autorizzata 90 nell'esempio indica 90 unità al trimestre ripetute per 4 volte).

Premendo il pulsante "Salva modifiche" il prodotto viene aggiunto nel piano terapeutico dell'assistito:

Attenzione, piano terapeutico non rigenerato. Premere il pulsante 'Rigenera Piano Terapeutico'.

Piano Terapeutico

DIABETICA X

M P S stato Attivo tipo esenzione Nessuna nr. esenzione

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 7AC2A01 - aghi per penna da insulina	100 unità	25 Luglio 2012 24 Luglio 2013	90	3	4	<input type="checkbox"/>

La data di fine piano verrà calcolata automaticamente in funzione del periodo e delle ripetizioni.

Dopo aver inserito il prodotto è necessario rigenerare il piano terapeutico per creare il dettaglio. Premendo il pulsante "Rigenera piano terapeutico" possono verificarsi due situazioni differenti:

1. le quantità autorizzate **non sono multiple** del confezionamento attribuito al tipo di prodotto (ad esempio il confezionamento di base degli aghi per penna da insulina è pari a 100 unità); in questo caso il sistema proporrà una soluzione, ripartendo in maniera proporzionale le quantità sui periodi:

DIABETICA X

Prodotto	Ripartizione sull'intero piano terapeutico				Quantità prescritta	Quantità effettiva
ISO: 7AC2A01 - Aghi per penna da Insulina Confezione: 100 unità	25/07/2012	25/10/2012	25/01/2013	25/04/2013	1440	1500
	24/10/2012	24/01/2013	24/04/2013	24/07/2013		
	400	400	300	400		
	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="400"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="400"/>		

Le quantità inserite o modificate nei periodi evidenziati NON saranno valide per il piano in corso ma SOLO in caso di RINNOVO del piano terapeutico.

L'operatore può eventualmente modificare le quantità di uno o più periodi, se la ripartizione proposta dal sistema non è soddisfacente. Il dettaglio va quindi convalidato premendo il pulsante "conferma". In tal modo viene generato il piano terapeutico che avrà il seguente formato:

Categoria	Descrizione Diagnosi	Data Diagnosi	Ente Diagnosi	Note Diagnosi	
DIABETICA X	Diabete tipo 1 o 2 >18 anni in tratt. insulinico	25/07/2012			
FARMACI DPC	Anemia da IRC				
Categoria	Esenzione	Numero Esenzione			
DIABETICA X	Nessuna				
Note	nota assistito				
Prodotti	Unità di misura	Quantità autorizzata	Quantità residua	Periodo	Mesi
ISO: 7AC2A01 - Aghi per penna da Insulina	unità	400	400	25 Luglio 2012 24 Ottobre 2012	3
ISO: 7AC2A01 - Aghi per penna da Insulina	unità	400	400	25 Ottobre 2012 24 Gennaio 2013	3
ISO: 7AC2A01 - Aghi per penna da Insulina	unità	300	300	25 Gennaio 2013 24 Aprile 2013	3
ISO: 7AC2A01 - Aghi per penna da Insulina	unità	400	400	25 Aprile 2013 24 Luglio 2013	3

[Stampa PDF](#)
[Torna alla scheda assistito](#)
[Torna alla ricerca assistiti](#)

2. le quantità autorizzate **sono multiple** del confezionamento attribuito al codice iso; in questo caso la rigenerazione del piano mostrerà direttamente il dettaglio del piano.

L'inserimento di un prodotto nel piano terapeutico con quantità superiori al limite massimo mensile previsto farà scattare un messaggio di avviso:

(dia.) 7AC2C - lancette pungidito (unità) ▼

25 ▼

Luglio ▼

2012 ▼

90000

3

4

La quantità autorizzata per il prodotto 7AC2C è maggiore del limite massimo mensile stabilito in 150,00000 unità.

In questo caso il sistema non consentirà l'inserimento di quantità superiori, bisognerà quindi correggere il valore riducendolo. In altri casi potrebbe essere previsto che per un determinato prodotto il limite massimo mensile possa essere forzato previa giustificazione.

In tal caso avremo un messaggio simile al seguente:

**La quantità autorizzata per il prodotto 7AC2C è maggiore del limite massimo mensile stabilito in 150,00000 unità.
Per autorizzare il piano è necessario fornire una giustificazione:**

Per autorizzare la quantità bisognerà indicare una giustificazione. Salvando, nella colonna "Funzioni", comparirà un nuovo pulsante "G" che permetterà di andare a consultare la giustificazione



Nel caso in cui si vogliono modificare le quantità autorizzate (anche se multiple del confezionamento) per ragioni legate al maggior fabbisogno temporaneo dell'assistito, è possibile accedere al dettaglio della ripartizione premendo il pulsante "M" accanto al relativo prodotto:



Da qui è possibile modificare le quantità come riportato negli esempi:

Prima:

DIABETICA X						
Prodotto	Ripartizione sull'intero piano terapeutico				Quantità prescritta	Schema di Packaging
ISO: 7AC2B01 - Siringhe da Insulina monouso Confezione: 1 unità	25/07/2012	25/10/2012	25/01/2013	25/04/2013	1600	Assente
	24/10/2012	24/01/2013	24/04/2013	24/07/2013		
	400	400	400	400		
	400	400	400	400		

Periodi evidenziati in rosso: le quantità non possono essere modificate per uno dei seguenti motivi: **1)** periodo passato, **2)** periodo già movimentato, **3)** modifiche consentite solo dal primo periodo futuro.

Dopo:

DIABETICA X						
Prodotto	Ripartizione sull'intero piano terapeutico				Quantità prescritta	Schema di Packaging
ISO: 7AC2B01 - Siringhe da Insulina monouso Confezione: 1 unità	25/07/2012	25/10/2012	25/01/2013	25/04/2013	1600	Assente
	24/10/2012	24/01/2013	24/04/2013	24/07/2013		
	400	400	400	400		
	400	300	500	400		

Periodi evidenziati in rosso: le quantità non possono essere modificate per uno dei seguenti motivi: **1)** periodo passato, **2)** periodo già movimentato, **3)** modifiche consentite solo dal primo periodo futuro.

E' inoltre possibile indicare se la modifica deve valere solamente sul piano in corso o anche per il prossimo rinnovo

La modifica del dettaglio deve valere: ▼

- solo per il piano in corso
- anche per il prossimo rinnovo

Per confermare la variazione premere il pulsante "Conferma Modifica". In questo caso il sistema riproporrà il nuovo piano terapeutico aggiornato con le modifiche apportate

Categoria	Descrizione Diagnosi	Data Diagnosi	Ente Diagnosi	Note Diagnosi
DIABETICA X	Diabete tipo 1 o 2 >18 anni in tratt. insulinico	25/07/2012		
FARMACI DPC	Anemia da IRC			
Categoria	Esenzione	Numero Esenzione		
DIABETICA X	Nessuna			
Note	nota assistito			

Prodotti	Unità di misura	Quantità autorizzata	Quantità residua	Periodo	Mesi
ISO: 7AC2B01 - Siringhe da Insulina monouso	unità	400	400	25 Luglio 2012 24 Ottobre 2012	3
ISO: 7AC2B01 - Siringhe da Insulina monouso	unità	300	300	25 Ottobre 2012 24 Gennaio 2013	3
ISO: 7AC2B01 - Siringhe da Insulina monouso	unità	500	500	25 Gennaio 2013 24 Aprile 2013	3
ISO: 7AC2B01 - Siringhe da Insulina monouso	unità	400	400	25 Aprile 2013 24 Luglio 2013	3

[Stampa PDF](#)
[Torna alla scheda assistito](#)
[Torna alla ricerca assistiti](#)

11 Funzioni per la gestione del piano terapeutico

Una volta che il piano terapeutico è stato creato, è possibile eseguire degli interventi di modifica qualora se ne presenti la necessità. Le operazioni consentite sono le seguenti.

Modifica dettaglio del prodotto - L'operazione può essere utile nel caso si intenda modificare la ripartizione del prodotto nei vari periodi di competenza. Basta modificare i valori nelle caselle corrispondenti salvare e rigenerare il piano.

FARMACI DPC				
Prodotto	27/12/2011	27/12/2012	27/12/2013	27/12/2014
ISO: DPC001 - ORMONE SOMATOTROPO	26/12/2012	26/12/2013	26/12/2014	26/12/2015
minisan: 026844199 - GENOTROPIN MINI*7TBF 0,4MG(1,2	5	4	4	5
produttore:	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
Confezione: 1 confezioni				

Periodi evidenziati in rosso: le quantità non possono essere modificate per uno dei seguenti motivi: **1)** periodo passato, **2)** periodo già m

La modifica del dettaglio deve valere: ▼

Si accede al dettaglio del piano dove le quantità autorizzate risultano modificabili:

501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA														
Prodotto	Ripartizione sull'intero piano terapeutico											Quantità prescritta	Schema di Packaging	
ISO: 501003 (501003) - aghi per iniettori a penna 32g	16/10/2007	16/11/2007	16/12/2007	16/01/2008	16/02/2008	16/03/2008	16/04/2008	16/05/2008	16/06/2008	16/07/2008	16/08/2008	16/09/2008	1100	<input type="button" value="Visualizza"/>
Confezione: 100 unità	15/11/2007	15/12/2007	15/01/2008	15/02/2008	15/03/2008	15/04/2008	15/05/2008	15/06/2008	15/07/2008	15/08/2008	15/09/2008	15/10/2008		
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0		

Le quantità dei periodi evidenziati non possono essere modificate.

La modifica del dettaglio deve valere: ▼

Basta posizionarsi sulla casella del periodo da modificare e correggere le quantità:

501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA														Quantità prescritta	Schema di Packaging
Prodotto	Ripartizione sull'intero piano terapeutico														
ISO: 501003 (501003) - aghi per iniettori a penna 32g Confezione: 100 unità	16/10/2007	16/11/2007	16/12/2007	16/01/2008	16/02/2008	16/03/2008	16/04/2008	16/05/2008	16/06/2008	16/07/2008	16/08/2008	16/09/2008	16/10/2008	1100	Visualizza
	15/11/2007	15/12/2007	15/01/2008	15/02/2008	15/03/2008	15/04/2008	15/05/2008	15/06/2008	15/07/2008	15/08/2008	15/09/2008	15/10/2008			
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0		
	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0		

Le quantità dei periodi evidenziati non possono essere modificate.

La modifica del dettaglio deve valere: solo per il piano in corso

Si può decidere se la modifica deve valere solo per il piano in corso:

La modifica del dettaglio deve valere: solo per il piano in corso

oppure deve valere anche per un eventuale rinnovo automatico del piano:

La modifica del dettaglio deve valere: anche per il prossimo rinnovo

Premendo il pulsante "Conferma modifica" la modifica verrà applicata al piano terapeutico. Il pulsante "Visualizza", nella colonna "Schema di Packaging", permette di visualizzare lo schema di ripartizione delle quantità che verrà replicato in caso di un eventuale rinnovo automatico del piano terapeutico.

Eliminazione prodotto - è sempre possibile eliminare un singolo prodotto dal piano terapeutico utilizzando il pulsante "E":

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 501003 (501003) - aghi per iniettori a penna 32g	100 unità	16 Ottobre 2007 15 Ottobre 2008	90	1	12	<input type="checkbox"/>

L'operazione ha come conseguenza la cancellazione del prodotto dal piano terapeutico.

Sostituzione prodotto - Questa funzione permette di sostituire un prodotto, attualmente presente nel piano terapeutico, con un nuovo appartenente alla stessa categoria:

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 505001 (505001) - glucosio e corpi chetonici nelle urine	50 unità	16 Ottobre 2007 15 Ottobre 2008	100	1	12	<input type="checkbox"/>

Premendo il pulsante "S" si accede alla seguente videata:

Sostituzione prodotto							
505 - STRISCE PER AUTOCONTROLLO							
Prodotto	Confezione	Date di riferimento	Quantità autorizzate	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.	
ISO: 505001 (505001) - glucosio e corpi chetonici nelle urine	50 unità	16/10/2007 15/10/2008	100	1	12	<input type="checkbox"/>	
Lista prodotti in sostituzione: - Seleziona -							

Vengono mostrate le informazioni del prodotto che si intende sostituire e una lista con i prodotti che fanno parte della stessa categoria. È necessario selezionare un prodotto dalla lista:

Prodotto	Confezione	Date di riferimento	Quantità autorizzate	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.	
ISO: 505001 (505001) - glucosio e corpi chetonici nelle urine	50 unità	18/10/2007 17/10/2008	90	1	12	<input type="checkbox"/>	
Lista prodotti in sostituzione: - Seleziona -							
<ul style="list-style-type: none"> - Seleziona - (505.) 505003 (505003) - corpi chetonici nel sangue (505.) 505004 (505004) - strisce per autocontrollo metabolico di glucosio nel sangue 							

Premendo il pulsante "Salva" la sostituzione verrà eseguita. Successivamente va rigenerato il piano terapeutico.

Consultazione dello storico variazioni - per ogni prodotto è possibile verificare tutte le operazioni eseguite premo il pulsante "V":

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 501008 (501008) - siringhe da 1 cc s.s.m 30g (100 u.i.)	1 unità	18 Ottobre 2007 17 Ottobre 2008	120	1	12	<input type="checkbox"/>

Ogni modifica apportata al piano viene registrata dal sistema:

Categoria	Stato categoria	Tipo esenzione	Numero esenzione	Codice ISO	Codice minsan	Codice produttore	Data inizio piano	Data fine piano	Rinnovo autom.	Periodo	Ripetizioni	Quantità autorizzate	Giustifica prodotto	Giustifica categoria	Tipo modifica	Utente	Data/ora modifica
501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA	Attivo	Patologia		501008 (501008)			18/10/2007	17/10/2008	No	1	12	90			Inserimento	asi	18/10/2007 18.39.47
501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA	Attivo	Patologia		501008 (501008)			18/10/2007	17/10/2008	No	1	12	120			Modifica piano	asi	18/10/2007 18.39.54

Piano terapeutico del prodotto - il dettaglio del piano terapeutici relativo al singolo prodotto è consultabile e stampabile premendo il pulsante "P":

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 501008 (501008) - siringhe da 1 cc s.s.m 30g (100 u.i.)	1 unità	18 Ottobre 2007 17 Ottobre 2008	120	1	12	<input type="checkbox"/>

In tal modo è possibile avere la visualizzazione del piano dello specifico prodotto.

Rinnovo automatico - è possibile impostare, per un determinato prodotto, l'eventuale rinnovo automatico. Basta spuntare la casella seguente:

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 505001 (505001) - glucosio e corpi chetonici nelle urine	50 unità	18 Ottobre 2007 17 Ottobre 2008	90	1	12	<input checked="" type="checkbox"/>

Salvando la modifica, quando il piano giungerà a scadenza verrà automaticamente rinnovato dal sistema e avrà le stesse caratteristiche (quantità, periodo e ripetizioni) del piano terminato, ovviamente con una nuova data di decorrenza e una nuova scadenza. (In alcune realtà la possibilità di selezionare il Rinnovo Automatico potrebbe essere inibita.) Questa operazione va eseguita prima che il piano scada. Qualora non venisse abilitato il rinnovo automatico, all'indomani della scadenza il piano si presenterà così:

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 501003 (501003) - aghi per iniettori a penna 32g	100 unità	1 Ottobre 2006 30 Settembre 2007 Piano scaduto	90	1	12	<input type="checkbox"/>

Il rinnovo di un piano scaduto è possibile ma va eseguito manualmente. In corrispondenza della categoria è disponibile il pulsante "Rinnovo":

501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA							
		M P	stato Attivo	tipo esenzione Patologia	nr. esenzione	Rinnovo	Pianifica
Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 501003 (501003) - aghi per iniettori a penna 32g	100 unità	1 Ottobre 2006 30 Settembre 2007 Piano scaduto	90	1	12	<input type="checkbox"/>

Premendolo si accede alla seguente videata:

Rinnovo manuale piani scaduti categoria: 501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA					
Prodotto	Data inizio piano	Quantità autorizzate	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
ISO: 501003 (501003) - aghi per iniettori a penna 32g	18 ▼ Ottobre ▼ 2007 ▼	90	1	12	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Conferma"/>					

Il sistema propone per una stessa categoria tutti i prodotti scaduti per i quali è possibile eseguire un rinnovo manuale. È possibile modificare la data di decorrenza, le quantità, il periodo, le ripetizioni e impostare se necessario il rinnovo automatico. Confermando, il piano terapeutico relativo al prodotto verrà rinnovato:

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 501003 (501003) - aghi per iniettori a penna 32g	100 unità	18 Ottobre 2007 17 Ottobre 2008	90	1	12	<input type="checkbox"/>

Funzioni relative alla categoria

Passiamo ora alle caratteristiche e alle funzionalità disponibili a livello di categoria. Così come è possibile modificare il dettaglio di un singolo prodotto, è possibile modificare il dettaglio di tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria. Premendo il pulsante M in corrispondenza della categoria:

101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA											
		M	P	stato	Attivo	tipo esenzione	Nessuna	nr. esenzione		Rinnovo	Pianifica
Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento		Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.			
S V E M P	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso	1 unità	19 Ottobre 2007	18 Ottobre 2008	10	1	12	<input type="checkbox"/>			
Valore medio mensile prodotto: 0											
S V E M P	ISO: 091824015 (101020) - minisacca post irrigazione	30 unità	19 Ottobre 2007	18 Ottobre 2008	30	1	12	<input type="checkbox"/>			
Valore medio mensile prodotto: 0											

si accede al dettaglio dei prodotti:

101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA														
Prodotto	Ripartizione sull'intero piano terapeutico												Quantità prescritta	Schema di Packaging
ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso Confezione: 1 unità	19/10/2007	19/11/2007	19/12/2007	19/01/2008	19/02/2008	19/03/2008	19/04/2008	19/05/2008	19/06/2008	19/07/2008	19/08/2008	19/09/2008	120	Asserte
	18/11/2007	18/12/2007	18/01/2008	18/02/2008	18/03/2008	18/04/2008	18/05/2008	18/06/2008	18/07/2008	18/08/2008	18/09/2008	18/10/2008		
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Le quantità dei periodi evidenziati non possono essere modificate.														
La modifica del dettaglio deve valere: solo per il piano in corso														
Prodotto	Ripartizione sull'intero piano terapeutico												Quantità prescritta	Schema di Packaging
ISO: 091824015 (101020) - minisacca post irrigazione Confezione: 30 unità	19/10/2007	19/11/2007	19/12/2007	19/01/2008	19/02/2008	19/03/2008	19/04/2008	19/05/2008	19/06/2008	19/07/2008	19/08/2008	19/09/2008	360	Asserte
	18/11/2007	18/12/2007	18/01/2008	18/02/2008	18/03/2008	18/04/2008	18/05/2008	18/06/2008	18/07/2008	18/08/2008	18/09/2008	18/10/2008		
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Le quantità dei periodi evidenziati non possono essere modificate.														
La modifica del dettaglio deve valere: solo per il piano in corso														

Vale quanto già detto riguardo alla modifica delle quantità dei singoli periodi. In questo caso l'operazione può essere eseguita contemporaneamente su più prodotti. La visualizzazione e stampa del piano terapeutico può essere limitata ai prodotti della sola categoria, premendo il pulsante "P":

101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA

M P stato Attivo tipo esenzione Nessuna nr. esenzione

Alla categoria viene assegnato uno stato che può assumere uno dei seguenti valori:

101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA

M P stato - Selezione - tipo esenzione Nessuna nr. esenzione

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema mono pezzo a fondo chiuso	1 unità	19 Ottobre 2007 18 Ottobre 2008	10	1	12	<input type="checkbox"/>

- Attivo - è lo stato che rende possibile l'inserimento dei prodotti nel piano e l'erogazione degli stessi da parte delle farmacie.
- Piano Terminato - salvando questo stato si ha come effetto quello di eliminare dal piano terapeutico tutti i prodotti appartenenti alla categoria.
- Ricetta/Sospeso - questo stato consente di bloccare l'erogazione dei prodotti da parte delle farmacie, mantenendo in vita il piano terapeutico. È uno stato che può essere utilizzato quando si ha la necessità di sospendere il piano terapeutico senza necessità di eliminarlo.

Se configurate, per ogni categoria presente nel piano terapeutico è possibile attribuire un tipo esenzione, selezionabile tra quelli presenti nella lista corrispondente:

101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA

M P stato - Selezione - tipo esenzione Nessuna nr. esenzione

Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema mono pezzo a fondo chiuso	1 unità	2007 2008	10	1	12	<input type="checkbox"/>

Valore medio mensile prodotto: 0

Il tipo esenzione può essere accompagnato dall'inserimento del numero esenzione:



Pianificazione piani terapeutici - Questa funzione consente di inserire, per un determinato assistito, prodotti già presenti nel piano terapeutico e non ancora scaduti. Supponiamo, ad esempio, che il piano terapeutico sia composto dai prodotti seguenti:



Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso	1 unità	1 Novembre 2006 31 Ottobre 2007	90	1	12	<input type="checkbox"/>
Valore medio mensile prodotto: 0							
S V E M P	ISO: 091824015 (101020) - minisacca post irrigazione	30 unità	1 Novembre 2006 31 Ottobre 2007	30	1	12	<input type="checkbox"/>
Valore medio mensile prodotto: 0							

Potremmo avere la necessità di rinnovare il piano prima della sua scadenza senza però che venga eliminato il piano in corso. Questa necessità viene soddisfatta dalla funzione "Pianifica", che permette di operare su tutti i prodotti della stessa categoria per i quali è presente un piano in corso. Sono quindi esclusi eventuali piani scaduti.

101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA							
M P		stato Attivo	tipo esenzione Nessuna	nr. esenzione	Rinnovo	Pianifica	
Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso	1 unità	1 Novembre 2006 31 Ottobre 2007	90	1	12	<input type="checkbox"/>
							Valore medio mensile prodotto: 0
S V E M P	ISO: 091824015 (101020) - minisacca post irrigazione	30 unità	1 Novembre 2006 31 Ottobre 2007	30	1	12	<input type="checkbox"/>
							Valore medio mensile prodotto: 0

Premendo tale pulsante "Pianifica" si accede alla seguente videata:

Pianifica i piani della categoria: 101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA								
Pianifica	Prodotto	Data inizio piano			Quantità autorizzate	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
<input checked="" type="checkbox"/>	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso	1	Novembre	2007	90	1	12	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ISO: 091824015 (101020) - minisacca post irrigazione	1	Novembre	2007	30	1	12	<input type="checkbox"/>

Vengono mostrati tutti i prodotti della categoria per i quali è possibile generare un nuovo piano. La data di decorrenza proposta è costituita dal primo giorno successivo alla data di scadenza del piano, attualmente in corso, per quello specifico prodotto. È possibile modificare la data di inizio piano posticipandola ma non anticipandola, poiché questa si sovrapporrebbe al piano in corso. Il sistema mostrerà il seguente avviso nel caso in cui la data impostata non fosse corretta:

Pianifica	Prodotto	Data inizio piano			Quantità autorizzate	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
<input checked="" type="checkbox"/>	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso	1	Ottobre	2007	90	1	12	<input type="checkbox"/>
La data d'inizio piano del prodotto 091804003 (101003) deve essere uguale o successiva a 01/11/2007								
<input checked="" type="checkbox"/>	ISO: 091824015 (101020) - minisacca post irrigazione	1	Novembre	2007	30	1	12	<input type="checkbox"/>

La colonna "Pianifica" mostra una casella con un simbolo di spunta impostato. Nel caso in cui per la stessa categoria fossero presenti più prodotti ma non tutti fossero da pianificare, basterà togliere la spunta dai prodotti per i quali non si vuole creare un nuovo piano:

Pianifica i piani della categoria: Colostomia fondo sanitario FSN						
Pianifica	Prodotto	Data inizio piano	Quantità autorizzate	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
<input checked="" type="checkbox"/>	ISO: 091804003aFS - sistema a 1 pezzo: sacca a fondo chiuso minsar: 901477190 - ALMARYS PREFERENCE 30MM BEI	1 Giugno 2007	60	1	12	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ISO: 091824009FS - sacche scarico irrigazione minsar: 901485829 - ALTERNA SAC SCAR 40MM 30 12834	1 Giugno 2007	30	1	12	<input type="checkbox"/>

Inoltre è possibile modificare le quantità, il periodo e le ripetizioni se nel nuovo piano è cambiato qualcosa rispetto al piano in corso.

Premendo il pulsante "Conferma" il prodotto viene inserito nel piano terapeutico dell'assistito. Al fine di renderlo facilmente identificabile, il prodotto pianificato viene contrassegnato da una specifica dicitura:

101 - BORSE PER COLO-ILEOSTOMIA							
		M P stato Attivo	tipo esenzione Nessuna	nr. esenzione	Rinnovo	Pianifica	
Funzioni	Prodotto	Conf.	Date di riferimento	Quantità autorizzata	Periodo (mesi)	Ripetizioni	Rinnovo autom.
S V E M P	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso	1 unità	1 Novembre 2006 31 Ottobre 2007	90	1	12	<input type="checkbox"/>
Valore medio mensile prodotto: 0							
S V E M P	ISO: 091824015 (101020) - minisacca post irrigazione	30 unità	1 Novembre 2006 31 Ottobre 2007	30	1	12	<input type="checkbox"/>
Valore medio mensile prodotto: 0							
S V E M P Pianificato	ISO: 091804003 (101003) - borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso	1 unità	1 Novembre 2007 31 Ottobre 2008	90	1	12	<input type="checkbox"/>

L'operazione si consolida rigenerando il piano terapeutico.

12 Consultazioni piano terapeutico

Concludiamo citando alcune semplici funzioni di consultazione:

Consultazione storico variazioni - per ogni assistito, così come è possibile verificare tutte le operazioni eseguite su uno specifico prodotto, è possibile consultare lo storico di tutte le operazioni eseguite dalla creazione del primo piano terapeutico in avanti. Premendo il pulsante "Storico Variazioni":




Si accede all'elenco di tutte le operazioni eseguite, che possono riguardare anche prodotti non più presenti nell'attuale piano terapeutico.

Storico Variazioni dell'assistito 0A012345678																	
Categoria	Stato categoria	Tipo esenzione	Numero esenzione	Codice ISO	Codice minsan	Codice produttore	Data inizio piano	Data fine piano	Rinnovo autom.	Periodo	Ripetizioni	Quantità autorizzate	Giustifica prodotto	Giustifica categoria	Tipo modifica	Utente	Data/ora modifica
200 - AUSILI AD ASSORBENZA	Attivo	Nessuna		093004003 (200001)	904217748		10/10/2007	09/10/2008	No	1	12	90			Inserimento	asi	10/10/2007 23.11.57
200 - AUSILI AD ASSORBENZA	Attivo	Nessuna		093004003 (200001)	904217748		10/10/2007	09/10/2008	No	1	12	90			Eliminazione	asi	18/10/2007 10.45.27
501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA	Attivo	Patologia		501003 (501003)			16/10/2007	15/10/2008	No	1	12	90			Inserimento	asi	18/10/2007 10.46.20
501 - SIRINGHE E AGHI PER INIETTORI A PENNA	Attivo	Patologia		501003 (501003)			16/10/2007	15/10/2008	No	1	12	80			Modifica piano	asi	18/10/2007 10.50.03

Consultazione piani cancellati - tutti i prodotti che vengono eliminati dal piano possono essere consultati premendo il pulsante "Piani Cancellati":



Si accede alla seguente videata:

Risultato consultazione piani cancellati						
Codice Iso	Codice prodotto ASL	Codice Minsan	Codice Produttore	Descrizione Iso	Descrizione Minsan	Dettaglio
091804003	101003			borse per colo-ileostomia sistema monopezzo a fondo chiuso		

Cliccando sull'icona relativa al dettaglio, è possibile verificare come era stato costruito il piano ormai eliminato:

Codice Iso	Codice Prodotto Asl	Codice Minsan	Codice Produttore	Q.tà Autorizzata	Q.tà Residua	Data Inizio Periodo	Data Fine Periodo	Periodo
091804003	101003			10	10	19/10/2007	18/11/2007	1
091804003	101003			10	10	19/11/2007	18/12/2007	2
091804003	101003			10	10	19/12/2007	18/01/2008	3
091804003	101003			10	10	19/01/2008	18/02/2008	4
091804003	101003			10	10	19/02/2008	18/03/2008	5
091804003	101003			10	10	19/03/2008	18/04/2008	6
091804003	101003			10	10	19/04/2008	18/05/2008	7
091804003	101003			10	10	19/05/2008	18/06/2008	8
091804003	101003			10	10	19/06/2008	18/07/2008	9
091804003	101003			10	10	19/07/2008	18/08/2008	10
091804003	101003			10	10	19/08/2008	18/09/2008	11
091804003	101003			10	10	19/09/2008	18/10/2008	12

Consultazione piani scaduti - seguendo lo stesso criterio dei piani cancellati, premendo sul pulsante "Piani Scaduti":




si accede alla visualizzazione dei prodotti scaduti.

Codice Iso	Codice prodotto ASL	Codice Minsan	Codice Produttore	Descrizione Iso	Descrizione Minsan	Data inizio piano	Data fine piano	Dettaglio
				PRODOTTO INFERIORE TEST ALLERGENICO		26/06/2010	25/10/2010	

Premendo la "i" si accede al dettaglio del piano scaduto

13 Estrazione Movimenti

Nel menù principale premere il pulsante "Area Movimenti":

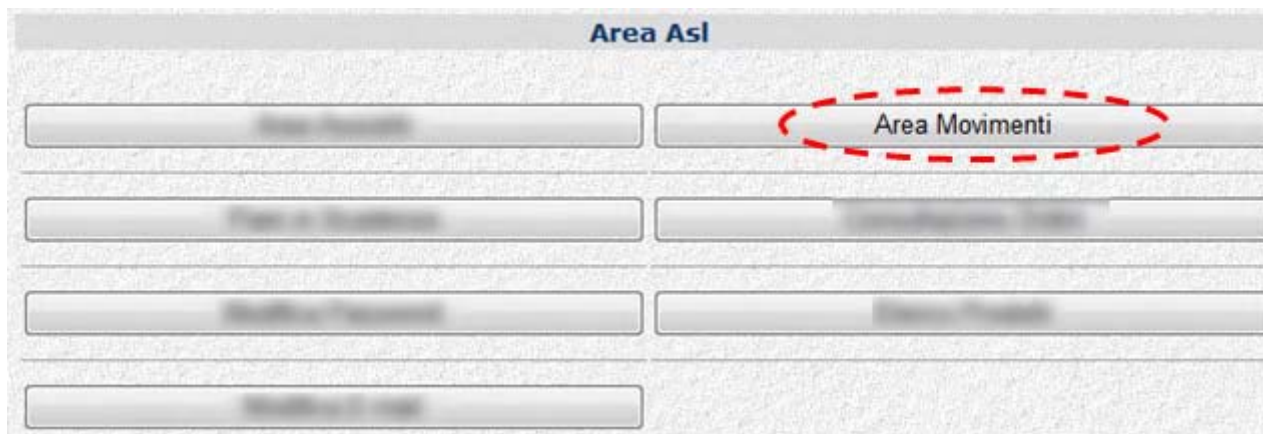

Quindi, premendo il pulsante "Consultazione Movimenti":



si accede alla seguente schermata:

Consultazione movimenti









Distretto ASL dell'Assistito	- Seleziona -
Codice Sanitario	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>
Anno/Numero Pratica	<input type="text"/> <input type="text"/>
Categoria	- Seleziona -
Distretto ASL della Farmacia	- Seleziona -
Utente	- Seleziona -
Fornitore	- Seleziona -
Tipo movimento	- Seleziona -
Tipo documento generato	- Seleziona -
Forzatura	- Seleziona -
Contabilizzazione	- Seleziona -
Numero Movimento	<input type="text"/> *
Generazione	- Seleziona -
Data inizio ricerca	14/03/2011
Data fine ricerca	14/03/2011
Periodo di Competenza di Contabilizzazione	da: <input type="text"/> a: <input type="text"/>

*L'impostazione del valore esclude gli altri parametri dalla ricerca.

Selezionando uno o più criteri di ricerca e un intervallo temporale, è possibile consultare i movimenti eseguiti che soddisfano le condizioni impostate. L'esecuzione della ricerca produce un risultato simile al seguente:

Risultato consultazione movimenti


Distretto ASL dell'Assistito: _____, Codice Sanitario: **tutti**, Codice Fiscale: **tutti**, Anno/Nr. Pratica: **tutti**, Categoria: **tutte**, Fornitore: **tutti**, Distretto ASL della Farmacia: **tutti**, Utente: **tutte**, Tipo movimento: **non impostato**, Tipo documento: **non impostato**, Forzatura: **non impostato**, Contabilizzazione: **non impostato**, Generazione: **non impostato**, Numero Movimento: **tutti**, Data inizio ricerca: **23/03/2011**, Data fine ricerca: **23/03/2011**, Periodo competenza di contabilizzazione: **non impostato**, Nr. movimenti trovati: **4**

Dettaglio	Numero Movimento	Tipo Documento	Codice Sanitario	Codice Fiscale	Anno/Nr. Pratica	Piano Terap.	Categoria	Data/ora movimento	Data/ora forzatura	Utente	Data/ora contabilizzazione	Data/ora ordine	Fornitore	Annulla	Data/ora annullo	Ripristina	Data/ora ripristino
	1120	modulo dispensazione			2011/191		Incontinenza Assorbenza	23/03/2011 11.57.59				12/03/2011 11.15.22					
	1118	modulo dispensazione			2011/1176		Incontinenza Assorbenza	23/03/2011 11.43.39				10/03/2011 15.25.12					
	1112	modulo dispensazione			2011/1171		Incontinenza Assorbenza	23/03/2011 11.12.38				11/03/2011 10.23.02					
	1109	modulo dispensazione			2011/1248		Incontinenza Assorbenza	23/03/2011 11.07.06				15/03/2011 8.26.24					

1

Ogni riga rappresenta un movimento. Cliccando sull'icona gialla presente nella colonna "Dettaglio" è possibile visualizzare il modulo di dispensazione PDF generato in fase di movimentazione, che può essere eventualmente stampato. Cliccando sull'icona "i" azzurra viene invece visualizzato il piano terapeutico completo dell'assistito.

Oltre ad essere visualizzati, i dati relativi ai movimenti possono essere scaricati in formato CSV (file di testo). Premendo il pulsante "Stampa CSV" il sistema propone l'apertura oppure il download di un file:

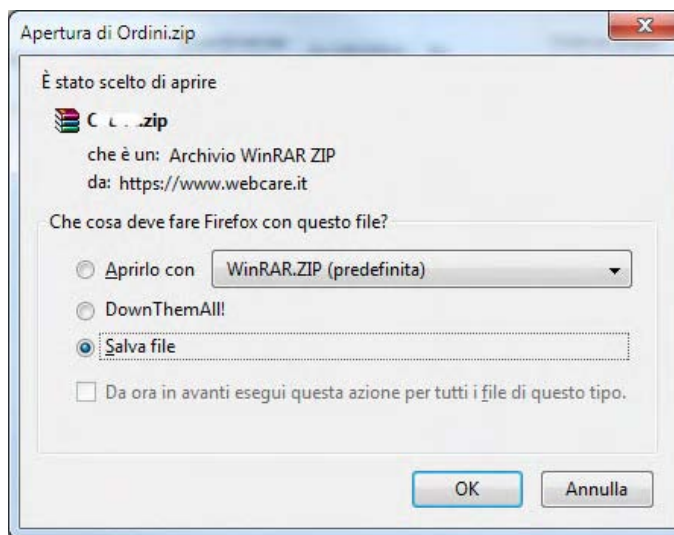

In caso non compaia la finestra di apertura / download del file, sarà necessario modificare la configurazione del proprio browser per abilitare il download (cfr. paragrafo "Impostazioni Browser").

14 Cambio Distretto Asl

Dall'area assistiti è presente il pulsante "Cambio distretto Asl di competenza" che permette la modifica al distretto d'appartenenza dell'assistito:



The screenshot shows a menu titled "Area Assistiti" with four buttons: "Inserimento Nuovo Assistito", "Ricerca Assistiti", "Cerca Assistiti", and "Cambio Distretto ASL di Competenza". The "Cambio Distretto ASL di Competenza" button is circled in red. A "Torna Indietro" button is located at the bottom center.

A questo punto è sufficiente inserire il codice fiscale dell'assistito e premere il pulsante "Cerca":



The screenshot shows a form titled "Cambio Distretto ASL" with a "Codice Fiscale:" label, an input field, and a "Cerca" button. Below the input field is a horizontal yellow line. At the bottom, there are two buttons: "Annulla" and "Torna Indietro".

Dal risultato premere il pulsante "Modifica":

Cambio Distretto ASL

Codice Fiscale:

#	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Sesso	Distretto ASL Appartenenza
Modifica	rsmra42l11a462q	rossi	mario	11/07/1942		M	ASL RM/A

Scegliere il distretto da modificare e confermare con il pulsante "Salva":

#	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Sesso	Distretto ASL
	rsmra42l11a462q	rossi	mario	11/07/1942		M	ASL RM/A

Distretto ASL Appartenenza